

Miele

Til optimal hygiejne
Miele bækkenskyller til hospitaler og plejehjem

Miele Professional. Immer Besser.



Kvalitet fra Miele Professional

Når du kun vil have det bedste



Miele Professional er kendt for højeste pålidelighed i alle hygiejneprogrammer. Vores rengørings- og desinfektionsmaskiner er efterspurgt inden for rengøring af medicinsk udstyr, mens vores hygiejnevaskemaskiner og friskvandsopvaskemaskiner opfylder kravene på hospitaler og plejehjem. Den nye Miele bækkenskyller fuldender nu tilbudet - til optimal hygiejne

Kvalitet

Solid konstruktion med materialer af høj kvalitet giver Miele-maskinerne det fremragende omdømme på markedet. Miele's nye bækkenskyller er derfor også konsekvent fremstillet af rustfrit stål og førsteklasses komponenter. Men kvalitet betyder også noget andet hos Miele. Den omfatter også alle de praktiske detaljer til hurtig, hygiejnisk og sikker fyldning, ergonomisk betjening samt problemfri installation i rum med begrænset plads.

Effektivitet

Med Miele Professionals nye bækkenskyller vælger du en ressourcebesparende og økonomisk løsning. Det kraftige dysesystem sikrer grundig rengøring af utensilierne med minimalt forbrug af vand, energi og rengøringsmidler. Også det robuste og næsten vedligeholdelsesfri design gør bækkenskylleren til en rentabel investering, der tjener sig ind år efter år.

Kapacitet

Miele bækkenskyller fjerner sikkert og pålideligt alt snavs fra bækkener og urinflasker, både af rustfrit stål og plast. De innovative faste og roterende dyser samt tilpassede rengøringsprogrammer sikrer maksimal grundig rengøring.



Med Miele Professional er du sikret optimal kvalitet, ydelse og effektivitet. Førsteklasses maskiner, der hver dag lever op til forventningerne. Derfor vil 97 % af alle kunder* købe en maskine fra Miele Professional igen.

Pålidelighed

I fire generationer har vi som familieejet firma udvist et særligt ansvar over for vores kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, produkter og processer samt ressourceforbrug.

- Produktudvikling, der konsekvent stiler mod kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed.
- Produktdesign, der har modtaget gentagne priser for ergonomi og funktionalitet.
- Omfattende systemløsninger fra samme leverandør.
- Lave driftsomkostninger i hele produktets levetid.
- Fremragende serviceniveau med et landsdækkende net af serviceteknikere med kort responstid.

55
ÅRS Medicinteknik



Bækkenskyller fra Miele Professional

Maksimal pålidelighed, sikkerhed og effektivitet



Sikring af hygiejne

Miele bækkenskyller er designet til at forhindre spredning af patogener - og beskytter derved både patienterne, beboerne på plejehjemmet samt personalet. Efter rengøring udfører maskinen en termisk desinfektion af utensilierne i henhold til de gældende retningslinjer og anbefalinger og sikrer dermed overholdelse af de højeste hygiejnestandarder.

Beskyttelse og effektivitet


Hygiejnisk sikkerhed opnås på flere niveauer med Miele bækkenskyller. De glatte rustfrie stålflader med minimale mellemrum er særligt nemme at rengøre, mens rengøringsbeholderen uden svejsesømme modvirker aflejring af rester.

Mere betjeningskomfort med praktisk tilbehør

Miele tilbyder et bredt sortiment af tilbehør til rengøring af forskelligt udstyr.

Oversigt over produktfordele

Miele bækkeskyller PWD 8545

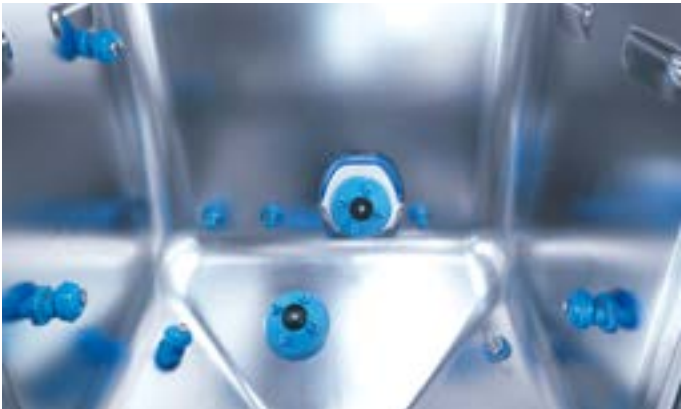

Højtudviklet rengørings- og desinfektionssystem

- Rengøringsystem med Multijet-rotationsdyser.
- Flere roterende og faste dyser sikrer, at utensilierne overspules 100 % med vand og kemi.
- Alle udvendige og indvendige overflader på utensilierne rengøres reproducerbart.
- Rengøringsbeholder og kabinet i rustfrit stål.
- Rengøringsbeholder uden svejsninger og med afrundede hjørner modvirker dannelsen af rester og kimoverførsel.
- Termisk desinfektion af rengøringsbeholder og dysesystem ved hver programafvikling.



Intelligent styring

- Konstant overvågning af maskinen og visning af programforløb.
- Individuel tilpasning af rengøringsprogrammer og -parametre til kundens behov.
- Tre rengøringsprogrammer til forskellige typer tilsudsning.
- Enkel betjening med taster til direkte valg.
- Alle relevante data vises i display med tekst, fx navn og status for det valgte program, resterende programtid, opnået A0-værdi, maksimal skylletemperatur.



Automatiske dørfunktioner

- Døren betjenes med fodkontakt, så utensilierne kan anbringes direkte i bækkeskylleren.
- Kontaminerede utensilier anbringes ergonomisk i maskinen.
- Yderligere øget driftssikkerhed og forbedret ergonomi.
- Automatisk låsning af rengøringsbeholderen ved programstart.

Bækkenskyller PWD 8545

PWD 8545 AD LCD



PWD 8545 AD LCD

Fritstående model, med automatisk døråbning/-lukning og LCD-display.

Produktegenskaber

- H 1630, B 545, D 475 mm
- Kapacitet/fyldning maks. 1 bækken og 1 urinflaske eller 3 urinflasker*
- Enkel betjening med taster til direkte valg
- Desinfektionsniveau tilpasset behov – indstillelig A0-værdi
- Optimale rengøringsresultater - Multijet rotationsdyse
- Kundespecifikke programmer - programmerbar styring

* Kapacitet afhænger af de utensilier, der skal rengøres og kan afvige. Forskellige kombinationer af urinflasker og bækken er mulig.

Eksempler på fyldning



Tekniske data

Bækkenskyller



Bækkenskyller	PWD 8545 AD LCD
Urinflasker pr. fyldning maks.	3
Bækkenskyller/urinflasker pr. fyldning	1/1
Programmer	3
Udvendige mål H/B/D [mm]	1630/545/475
Doseringspumpe til afkalkningsmiddel	•
Vandtilslutninger	KV/VV
Afløb	Vægafløb, kan ombygges
Eltilslutning	3N AC 380-400V 50Hz, 1 AC 230V 50Hz

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. Salg/Professional +45 4327 1510

miele-professional.dk
professional@miele.dk

Immer Besser

Miele har siden 1899 været tro over for sin virksomhedsfilosofi: Immer Besser. To ord, som danner grundlag for en kontinuerlig innovation samt sikrer en høj kvalitetsstandard. Et løfte, der giver professionelle brugere sikkerhed for, at de har besluttet sig for det rigtige produkt.

Prisvinder

Kompromisløs pålidelighed i produkter og ydelser er grunden til, at brugere regelmæssigt vælger Miele som bedste og mest troværdige mærke. Prestigefyldte priser som MX Award, iF og reddot Design Award og den tyske pris for bæredygtighed viser endvidere Miele's placering med hensyn til design, kvalitetsmanagement og ressourcebeskyttelse.

Kvalitet

Miele Professional har i årtier produceret holdbare vaskemaskiner og tørretumblere, opvaskemaskiner, rengørings- og desinfektionsmaskiner samt sterilisatorer i samme høje kvalitet. Omhyggeligt tilpasset tilbehør, omfattende service og hurtig reaktion fra Miele's kundeservice medfører optimal ydelse og økonomisk brug til enhver tid.

Miele Professional på internettet

- Udførlige informationer om tekniske data, udstyr og tilbehør
- Brochurer til alle produktgrupper og anvendelsesområder til download
- Beskrivende forklaringer, vejledninger og produktpræsentation på YouTube Channel